

Лідер в Україні з виробництва і
продажу виробів з гуми, ПВХ, ТЕР,
силікону та натурального латексу



КАТАЛОГ

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
ТА ТОВАРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ




ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КИЇВГУМА»

Історія підприємства бере свій початок з 1930 р. Тоді це був завод, який називався «Київкаучук». У 1931 році завод був прийнятий у систему Головгумопрому Наркомату важкої промисловості та отримав назву «Червоний гумовик». 1994 року підприємство було реорганізовано у ВАТ «Київгума», а 2008 року — ТОВ «КИЇВГУМА».

У 2013 році було здійснено планове перенесення виробничих потужностей з м. Києва на новий виробничий майданчик у м. Бровари (Київська область).

Завдяки багаторічному досвіду, постійному розвитку, оновленню технології та виробничої бази на сьогодні ТОВ «КИЇВГУМА» — лідер галузі в Україні.

Продукція ТОВ «КИЇВГУМА» відповідає всім вимогам європейських стандартів, що підтверджено міжнародними сертифікатами системи управління якістю TUV Austria ISO13485:2016, TUV SUD EN ISO 9001:2016, ДСТУ ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 15378:2019 та багатьма іншими.

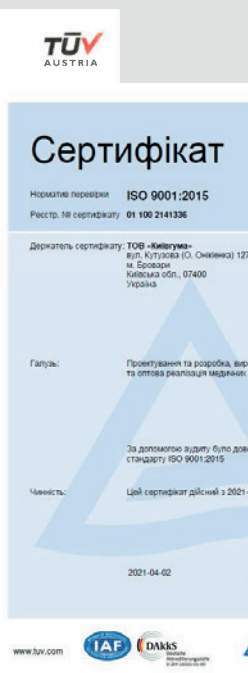

ЗМІСТ

ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Грілки гумові типу А в чохлах	03
Грілки гумові типу А, Б	04
Кухлі Есмарха гумові	05
Клейонка підкладна гумотканева	06
Бинт Мартенса	07
Наконечники для милиць гумові	08
Напальчники медичні гумові	09
Пузирі для льоду гумові	10
Рукавички латексні медичні анатомічні	11
Сечоприймач універсальний	12
Джгут кровоспинний типу Есмарха	13
Костюм біологічного захисту (комбінезон)	14
Халат захисний від інфекційних агентів	15
Комплект захисний медичний типу 1 (комбінезон) з ПВХ покриттям	16
Комплект захисний медичний типу 2 (халат) з ПВХ покриттям	17
Спринцівка типу А (з м'яким наконечником)	18
Спринцівка типу Б (з твердим наконечником)	19
Спринцівка типу Б виконання ІБ (жіночий душ)	20
Маткові кільця	21
Банки масажні полікарбонатні	22
Коло підкладне	23
Балон для тонометра із ПВХ	24

РОЗДІЛ II

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ

Трубки медичні гумові	25
Трубки медичні силіконові	26

РОЗДІЛ III

ЗАСОБИ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Аптечка медична загальновійськова індивідуальна (АМЗІ)	27
Пов'язка оклюзійна (торакальна грудна наліпка)	28
Джгут кровоспинний гумовий "ОМЕГА"	29
Марля спресована стерильна	30

Пакет перев'язувальний (бандаж)	31
Назофарингеальний повітровід	32
Ножиці для розрізання одягу та взуття (атравматичні)	33
Покривало рятувальне (термоковдра)	34

РОЗДІЛ IV

ТОВАРИ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Гумова петля FITNESSGUMA	35
Набір фітнес-гумок з 5 штук FITNESSGUMA	36
Еспандери кистьові FITNESSGUMA в асортименті	37
М'яч масажний FITNESSGUMA в асортименті	38

РОЗДІЛ V

ПРОБКИ ГУМОВІ МЕДИЧНІ

Пробки гумові медичні	39-42
Ковпачки захисні пластикові	42

РОЗДІЛ VI

ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Соски-пустушки латексні та каучукові	43-44
Соски-пустушки силіконові	45
Ланцюжок для соски-пустушки	46
Футляр для соски-пустушки "КОЛОБОК"	46
Масажер для ясен "РИБКА"	47
Щітки	47
Дитячий комплект для прийому ліків	48
Нагрудник дитячий з ПВХ покриттям	48
Соски молочні гумові та силіконові	49
Комплекти для годування з пляшечками з поліпропілену	50
Комплект для годування силіконовою пляшечкою	51
Молоковідсмоктувач універсальний	52
Молоковідсмоктувач	53
Молокозбірник	53
Аспіратор носовий (спринцівка Б-2) АСП	54
Пгієнічний набір "КРОХА"	55

ГРІЛКИ ГУМОВІ типу А в чохлах

Грілка в чохлі була розроблена спеціально для забезпечення більшого комфорту під час використання. Чохол забезпечує більш тривале утримання тепла, захищає від опіків (в разі використання надто гарячої води) та робить використання грілки максимально комфортним.

Матеріал, з якої виготовлений чохол, має висновок органів охорони здоров'я, не містить шкідливих компонентів. Підходить для використання як дорослим, так і дітям.

Грілка в чохлі ідеально підійде в якості оригінального та корисного подарунка.



ПЕРЕВАГИ

Грілка стійка до багаторазової дезінфекції

Підходить для багаторазового і тривалого використання

Безпечна для дорослих і дітей

Матеріал, з якої виготовлений чохол, має висновок органів охорони здоров'я

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура рідини для грілок не повинна перевищувати 70°C

Гарантійний термін зберігання - 3,5 роки з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня вводу в експлуатацію

КОМПЛЕКТНІСТЬ

грілка тип А

чохол (в'язка, жакард)

інструкція по застосуванню

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет

 **Групове:**
гофрокороб

ГРІЛКИ ГУМОВІ

типу А, Б

Грілка гумова типу А призначена для місцевого зігрівання тіла (грілка з пробкою).
Грілка гумова типу Б (комбінована) призначена для місцевого зігрівання тіла, для промивання і спринцювання (грілка з комплектуючими деталями).



ПЕРЕВАГИ

Грілки стійкі до багаторазової дезінфекції
Підходять для багаторазового і тривалого використання
Безпечні для дорослих і дітей

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єми грілок типу А та Б: 1, 2 та 3 літри (з урахуванням граничних відхилень)
Температура наповнюваної рідини для грілок не повинна перевищувати 70°C
Гарантійний термін зберігання - 3,5 роки з дати виготовлення
Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня вводу в експлуатацію

КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект грілки типу Б входять:
трубка, наконечники (дитячий, дорослий, матковий),
затискач

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



Групове:
гофрокороб
тип А 1 – 40 шт., тип А 2, А 3 – 30 шт.;
тип Б -1, Б-2, Б-3 – 20 шт.

КУХЛІ ЕСМАРХА

гумові

Призначений для санітарно-гігієнічних цілей (спринцювання, промивання).



ПЕРЕВАГИ

Стійкий до багаторазової дезінфекції

Виробляється з високоякісних матеріалів, узгоджених з органами охорони здоров'я

Підходить для багаторазового застосування

Безпечний для дорослих і дітей



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Має відкриту горловину для набору рідини, що забезпечує зручність використання виробу в лікувальних закладах.

Об'єм: №1 – $0,8 \pm 0,1$ л, №2 – $1,5 \pm 0,15$ л, №3 – $2,5 \pm 0,25$ л.

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня вводу в експлуатацію

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Кухоль, трубка,
наконечники (дитячий, матковий), затискач

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет




Групове:
гофрокороб – 20 шт.

КЛЕЙОНКА

підкладна гумотканева

Клейонка виду А, Б призначена для санітарно-гігієнічних цілей і використовується як підкладний вологонепроникний матеріал в медицині та побуті.

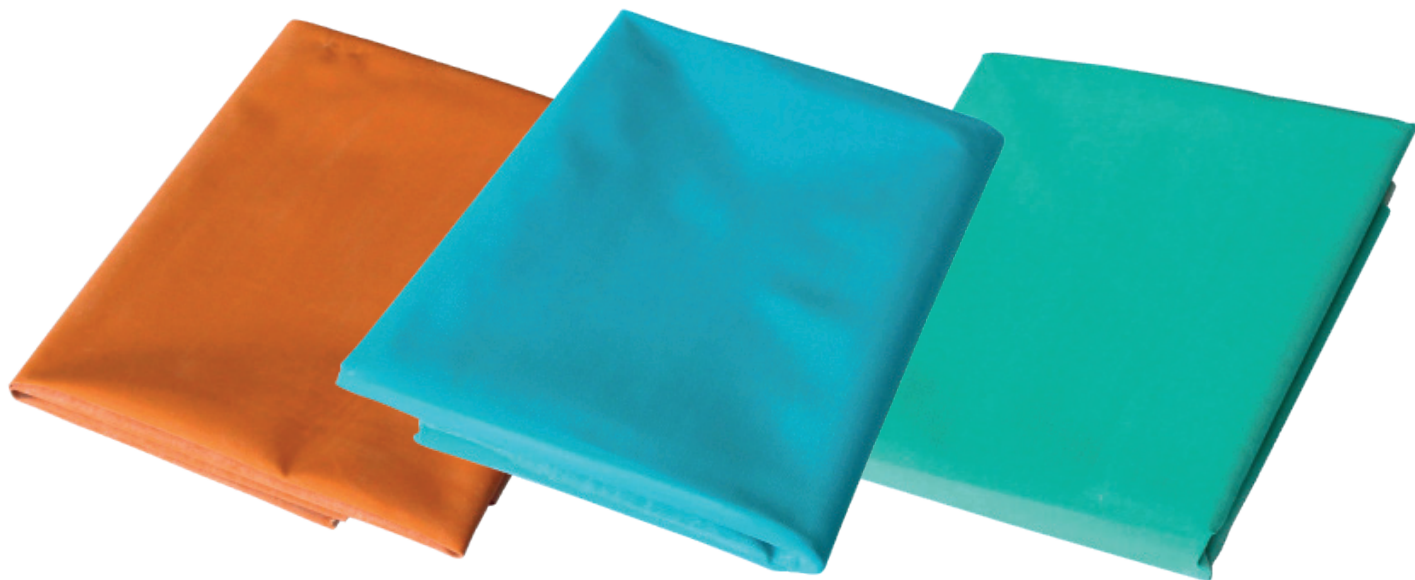

ПЕРЕВАГИ

Еластична, не липка, водо- та сечонепроникна
Стійка до багаторазової дезінфекції, зберігає при цьому еластичність
Безпечна в експлуатації для здоров'я людини

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відповідає ТУ У 22.1-35115248-035:2019

Залежно від тканини-основи клейонку випускають двох видів:

А – на основі бавовняних тканин;

Б – на основі поліефірно-віскозних або інших синтетичних тканин

Ширина не менше 0,85 м

Колір: помаранчевий, зелений, блакитний

Гарантійний термін зберігання: клейонка виду А – 24 місяці;

клейонка виду Б – 26 місяців з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації:

вид А – 1 місяць в лікувальних закладах і 6 місяців індивідуально,

вид Б – 2 місяці в лікувальних закладах і 8 місяців індивідуально

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет - 1 м, 1,5 м, 2 м.

 **Групове:**
гофрокороб 1 м - 30 шт,
1,5 м - 25 шт, 2 м - 20 шт;
в рулонах по 45 м, 50 м.

БИНТ МАРТЕНСА

Призначений для фіксації шин і пов'язок в травматології: медичних закладах, у військово-польових умовах, в побуті і ветеринарії.



ПЕРЕВАГИ

Еластичний

Безпечний в експлуатації для здоров'я людини

Стійкий до п'ятикратної дезінфекції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина – 3500±150 мм, 5000±150 мм

Товщина – 0,80±0,30 мм

Ширина – 55±3,0 мм

Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації – 1 місяць у межах гарантійного терміну зберігання

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



Групове:
поліпропіленовий мішок
3,5 м – 250 шт., 5 м – 150 шт.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИЛИЦЬ ГУМОВІ


Використовуються у медицині та в побутових умовах, для тростин, милиць і робочих протезів нижніх кінцівок. Призначені для комплектації протезної продукції і слугують для амортизації під час ходи і запобігання ковзанню.



№ 16 (Ø 16 мм)



№ 19 (Ø 19 мм)

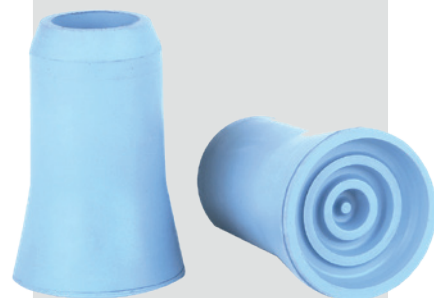

№ 19 (Ø 19 мм)



№ 21 (Ø 21 мм)



№ 25 (Ø 25 мм)



№ 28 (Ø 28 мм)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: суміш гумова на основі синтетичного каучуку

Номери наконечників: 16, 19, 21, 25, 28

Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ



Групове:
гофрокороб - 50 шт.



НАПАЛЬЧНИКИ МЕДИЧНІ ГУМОВІ

Використовуються для захисту та ізоляції пальців рук в медицині і в побутових умовах.



ПЕРЕВАГИ

Виготовлені з натурального латексу і дозволені до використання органами охорони здоров'я
Безпечні в експлуатації для здоров'я людини
Стойкі до 3-х кратної дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина 73 ± 5 мм, ширина 28 ± 2 мм, товщина 0,15–0,40 мм
Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:

полімерний пакет по 10 шт., по 100 шт.; картонна коробочка з європетлею по 40 шт.



Групове:

гофрокороб – 250 полімерних пакетів по 10 шт.; 10 полімерних пакетів по 100 шт.;
1000 шт. насипом; 16 коробочок по 40 шт.

ПУЗИРІ ДЛЯ ЛЬОДУ

ГУМОВІ

Використовуються в медичних закладах, побутових умовах для місцевого охолодження тіла.



ПЕРЕВАГИ

Безпечні в експлуатації для здоров'я людини
Стійкі до багаторазової дезінфекції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виготовляються в таких розмірах: №1 – діаметром 150 мм, №2 - діаметром 200 мм, №3 - діаметром 250 мм.

Герметичні

Гарантійний термін зберігання - 3,5 роки з дня виготовлення

Гарантійний термін експлуатації - 3 роки з дня продажу через торгівельну мережу, а в лікувальних закладах – 1,5 роки з дня отримання споживачем

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



Групове:
гофрокороб №1 – 50 шт.; №2 – 35 шт.; №3 – 30 шт.

РУКАВИЧКИ ЛАТЕКСНІ

медичні анатомічні

Призначені для захисту рук під час виконання професійних обов'язків в медичній сфері та інших галузях народного господарства.



ПЕРЕВАГИ

- Багаторазового використання
- Підлягають дезінфекції
- Підвищеної міцності
- Мають анатомічну форму та подовжену крагу
- Зберігають тактильні відчуття
- Виготовлені з натурального латексу або з латексу на основі нітрилу



ОПИС ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Потовщена міцна стінка та подовжена крага рукавичок забезпечує посилений рівень захисту, в т.ч. більшу стійкість до механічних ушкоджень. Анатомічна форма рукавиць (окремо на ліву та праву руку) повністю передає форму долонь та створює максимальний комфорт під час використання. М'який, еластичний матеріал та текстурована поверхня в долонній частині і на пальцях максимально зберігає тактильні відчуття. Рукавички нестерильні.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує якість рукавичок при дотриманні умов зберігання та експлуатації
Гарантійний термін зберігання рукавичок – 5 років з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
п/е пакет – 1 пара

 **Групове:**
гофрокороб – 50 пар

СЕЧОПРИЙМАЧ універсальний

Для екстреного прийому сечі за відсутності стаціонарного туалету або неможливості ним скористатися.



ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує безпечне і гігієнічно чисте задоволення особистих санітарних потреб
- Спеціальна горловина запобігає розбризкуванню сечі
- Є одноразовим і перед застосуванням не потребує дезінфекційної обробки
- Мішечок виготовлений зі спеціального мікропористого водонепроникного матеріалу, який стійкий до кислот і лугів
- Рідина з мішечка не виливається, оскільки перетворюється на гель
- Вироби з цього матеріалу не токсичні, не викликають алергії
- Форма горловини дозволяє герметично прилягати як до чоловічого, так і до жіночого тіла

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Зовнішній пакет являє собою поліетиленовий резервуар з одним отвором, в якому є адаптер, виконаний у вигляді овальної горловини. Горловина має форму, в яку легко вставляється чоловічий статевий орган, а також повторює форму жіночого проміжжя
- Об'єм поглинаючої рідини: до 500 мл
- Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

-  Індивідуальне: картонна коробочка
-  Групове: гофрокороб - 50 шт.

ДЖГУТ КРОВОСПИННИЙ типу Есмарха

Призначений для тимчасової зупинки кровотечі на належній ділянці тіла людини
Використовуються в медичній практиці, для індивідуального застосування.

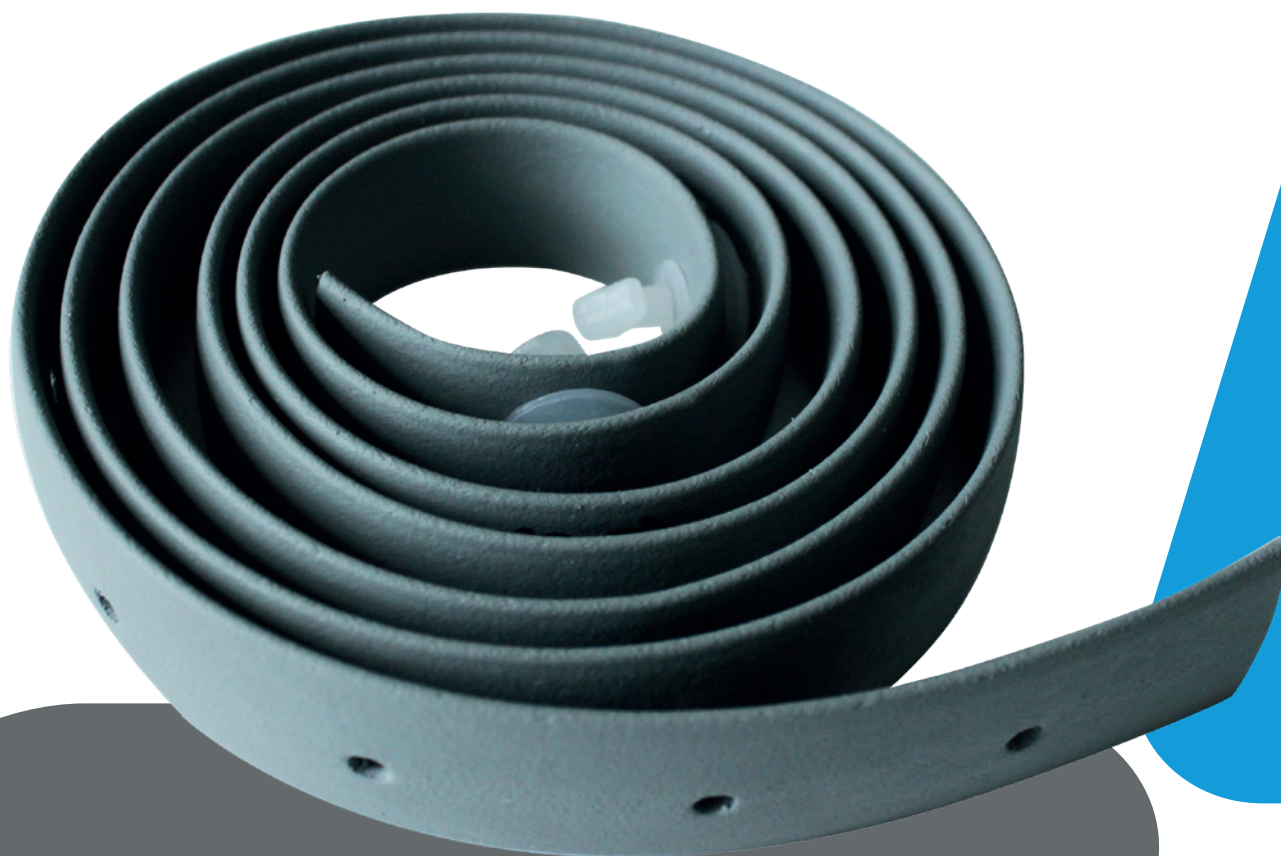

ПЕРЕВАГИ

Стійкий до п'ятикратної дезінфекції
Виготовляється з гуми високої якості
Не містить токсичних та алергенних елементів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джгут являє собою гумову стрічку з розмірами, мм:
довжина – 1400 (+50; -70); ширина – 25±2,5
Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виготовлення
Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з дня продажу в межах гарантійного терміну зберігання

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектується двома пластмасовими кнопками

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет

 **Групове:**
гофрокороб - 40 шт.

КОСТЮМ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ (комбінезон)

Костюм біологічного захисту/комбінезон призначений для захисту медичного персоналу, пацієнтів (хворих), населення від впливу можливих інфекційних агентів, рідких хімічних речовин, різноманітних патогенних мікробів, вірусів, бактерій.

Відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ №771 від 21.08.2019 р.) та пройшов відповідні випробування

ПЕРЕВАГИ

Багаторазового використання
Підлягає багаторазовій дезінфекції
Виготовляється з високоякісної тканини GumaTex™
Стойкий до просочення інфекційних агентів



ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ П'ЯТИ РОЗМІРІВ:

- № 1 (S) – розмір 48-52 (зріст від 158 до 165 см);
- № 2 (M) – розмір 52-56 (зріст від 170 до 176 см);
- № 3 (L) – розмір 52-56 (зріст від 182 до 188 см);
- № 4 (XL) – розмір 52-56 (зріст від 188 до 194 см);
- № 5 (XXL) – розмір 56-60 (зріст від 194 до 200 см)

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:

- а) комбінезон розмір № 1 (S) та бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті);
- б) комбінезон розмір № 2 (M) та бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті);
- в) комбінезон розмір № 3 (L) та бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті);
- г) комбінезон розмір № 4 (XL) та бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті);
- д) комбінезон розмір № 5 (XXL) та бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті).

Інструкція щодо застосування



Комбінезон має цілісну спеціально розроблену конструкцію. Капюшон комбінезону вшитий в горловину, а лицьовий виріз прошитий еластичною стрічкою, що щільно прилягає до обличчя. Горловина комбінезону містить застібку з gumкою всередині, що кріпиться за допомогою липкої стрічки. Для регулювання прилягання капюшону до голови ззаду вшиті дві пари спеціальних стрічок-зав'язок. Рукави та низ штанин оброблені міцним швом з gumкою всередині, що забезпечує тісне прилягання до тіла. По лінії талії на задній стороні комбінезону вшита gumка, що створює додатковий комфорт у використанні. Комбінезон застібується на пластикову блискавку з клапаном (2,5 см), який закріплюється липучкою. Бахіли високі (до коліна). Верх бахіли оброблений спеціальним швом з gumкою всередині, що забезпечує щільне прилягання до тіла. Ззаду вшита стрічка, що дозволяє регулювати прилягання бахіли до ноги в частині носка. Бахіла має підшви з подвійної тканини, щільно прошитою швами.

СКЛАД: ТКАНИНА
GumaTex

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
МЕТОДИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ЗБЕРІГАННЯ



ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



водонепроникний



БАГАТО ЦИКЛІВ
ДЕЗІНФЕКЦІЇ



ПОВЕРНУТИСЯ
ДО ЗМІСТУ

ХАЛАТ ЗАХИСНИЙ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ АГЕНТІВ

Халат захисний від інфекційних агентів призначений для захисту медичних працівників, пацієнтів (хворих), населення від впливу можливих інфекційних агентів, рідких хімічних речовин, різноманітних патогенних мікробів, вірусів, бактерій.

Відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ №771 від 21.08.2019 р.) та пройшов відповідні випробування

ПЕРЕВАГИ

Багаторазового використання
Підлягає багаторазовій дезінфекції
Виготовляється з високоякісної тканини GumaTex™
Стійкий до просочення інфекційних агентів



ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ П'ЯТИ РОЗМІРІВ:

№ 1 (S) – розмір 48-52 (зріст від 158 до 165 см);
№ 2 (M) – розмір 52-56 (зріст від 170 до 176 см);
№ 3 (L) – розмір 52-56 (зріст від 182 до 188 см);
№ 4 (XL) – розмір 52-56 (зріст від 188 до 194 см);
№ 5 (XXL) – розмір 56-60 (зріст від 194 до 200 см)

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:

- а) халат розмір № 1 (S), бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;
- б) халат розмір № 2 (M), бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;
- в) халат розмір № 3 (L), бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;
- г) халат розмір № 4 (XL), бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;
- д) халат розмір № 5 (XXL), бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60.

Інструкція щодо застосування



Халат має спинку з запахом та фіксується на зав'язках по лінії талії. Горловина халату прошита еластичною трикотажною стрічкою, ззаду закріплюється за допомогою стрічок-зав'язок. Рукави оброблені міцним швом з гумкою всередині, що забезпечує тісне прилягання до тіла. Шолом складається з капюшону та пелерини, що зшиті між собою. Розмір та рівень притискання шолому до обличчя регулюється двома парами стрічок-зав'язок (в області шиї та в потиличній частині). Лицьовий виріз шолому прошитий еластичною трикотажною стрічкою. Бахіли високі (до коліна). Верх бахіли оброблений спеціальним швом з гумкою всередині, що забезпечує щільне прилягання до тіла. Ззаду вшита стрічка, що дозволяє регулювати прилягання бахіли до ноги в частині носка. Бахіла має підошву з подвійної тканини, щільно прошитою швами.

СКЛАД: ТКАНИНА
GumaTex

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



водонепроникний



БАГАТО ЦИКЛІВ
ДЕЗІНФЕКЦІЇ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
МЕТОДИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ЗБЕРІГАННЯ



ПОВЕРНУТИСЯ
ДО ЗМІСТУ

КОМПЛЕКТ ЗАХИСНИЙ МЕДИЧНИЙ ТИПУ 1 (комбінезон) з ПВХ покриттям

Комплект захисний медичний призначений для захисту шкіри, одягу та взуття медичних працівників.

Відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (затвердженого Постановою КМУ №753 від 02.10.2013 р.)

ПЕРЕВАГИ

Багаторазового використання

Підлягає багаторазовій дезінфекції

Виготовляється з високоякісної тканини GumaTex™

Шолом, рукави та штанини комбінезону мають

спеціальні манжети для щільного прилягання до тіла

ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ П'ЯТИ РОЗМІРІВ:

№ 1 (S) – розмір 48-52 (зріст від 158 до 165 см);

№ 2 (M) – розмір 52-56 (зріст від 170 до 176 см);

№ 3 (L) – розмір 52-56 (зріст від 182 до 188 см);

№ 4 (XL) – розмір 52-56 (зріст від 188 до 194 см);

№ 5 (XXL) – розмір 56-60 (зріст від 194 до 200 см)

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:

а) комбінезон розмір № 1 (S) та бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті);

б) комбінезон розмір № 2 (M) та бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті);

в) комбінезон розмір № 3 (L) та бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті);

г) комбінезон розмір № 4 (XL) та бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті);

д) комбінезон розмір № 5 (XXL) та бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті)

Інструкція щодо застосування



Комбінезон має цілісну спеціально розроблену конструкцію. Капюшон комбінезону вшитий в горловину, а лицьовий виріз прошитий еластичною стрічкою, що щільно прилягає до обличчя. Горловина комбінезону має застібку з gumкою всередині, що кріпиться за допомогою липкої стрічки. Для регулювання прилягання капюшону до голови ззаду вшиті дві пари спеціальних стрічок-зав'язок. Рукави та низ штанин оброблені міцним швом з gumкою всередині, що забезпечує тісне прилягання до тіла. По лінії талії на задній стороні комбінезону вшита gumка, що створює додатковий комфорт у використанні. Комбінезон застібується на пластикову блискавку з клапаном (2,5 см), який закріплюється липучкою. Бахіли високі (до коліна).

Верх бахіли оброблений спеціальним швом з gumкою всередині, що забезпечує щільне прилягання до тіла. Ззаду вшита стрічка, що дозволяє регулювати прилягання бахіли до ноги в частині носка. Бахіла має підошву з подвійної тканини, щільно прошитою швами.

СКЛАД: ТКАНИНА
GumaTex

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
МЕТОДИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ЗБЕРІГАННЯ



ПАКУВАННЯ

Індивідуальне:
полімерний пакет



водонепроникний



БАГАТО ЦИКЛІВ
ДЕЗІНФЕКЦІЇ



ПОВЕРНУТИСЯ
ДО ЗМІСТУ

КОМПЛЕКТ ЗАХИСНИЙ МЕДИЧНИЙ ТИПУ 2 (халат) з ПВХ покриттям

Комплект захисний медичний призначений для захисту шкіри, одягу та взуття медичних працівників.

Відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (затвердженого Постановою КМУ №753 від 02.10.2013 р.)

ПЕРЕВАГИ

Багаторазового використання

Підлягає багаторазовій дезінфекції

Виготовляється з високоякісної тканини GumaTex™

Шолом, рукави мають спеціальні манжети для щільного прилягання до тіла

ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ П'ЯТИ РОЗМІРІВ:

№ 1 (S) – розмір 48-52 (зріст від 158 до 165 см);

№ 2 (M) – розмір 52-56 (зріст від 170 до 176 см);

№ 3 (L) – розмір 52-56 (зріст від 182 до 188 см);

№ 4 (XL) – розмір 52-56 (зріст від 188 до 194 см);

№ 5 (XXL) – розмір 56-60 (зріст від 194 до 200 см)

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:

а) халат розмір № 1 (S), бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;

б) халат розмір № 2 (M), бахіли розмір № 1 (до 40 розміру у взутті) або розмір №2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;

в) халат розмір № 3 (L), бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;

г) халат розмір № 4 (XL), бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60;

д) халат розмір № 5 (XXL), бахіли розмір № 2 (41-46 розмір у взутті) та шолом розмір 56-60

Інструкція щодо застосування



Халат має спинку з запахом та фіксується на зав'язках по лінії талії. Горловина халату прошита еластичною трикотажною стрічкою, ззаду закріплюється за допомогою стрічок-зав'язок. Рукави оброблені міцним швом з гумкою всередині, що забезпечує тісне прилягання до тіла.

Шолом складається з капюшону та пелерини, що зшиті між собою. Розмір та рівень притискання шолому до обличчя регулюється двома парами стрічок-зав'язок (в області шиї та в потиличній частині). Лицьовий виріз шолому прошитий еластичною трикотажною стрічкою. Бахіли високі (до коліна). Верх бахіли оброблений спеціальним швом з гумкою всередині, що забезпечує щільне прилягання до тіла. Ззаду вшита стрічка, що дозволяє регулювати прилягання бахіли до ноги в частині носка. Бахіла має підошву з подвійної тканини, щільно прошитою швами.

СКЛАД: ТКАНИНА
GumaTex

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



водонепроникний



БАГАТО ЦИКЛІВ
ДЕЗІНФЕКЦІЇ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
МЕТОДИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ЗБЕРІГАННЯ



ПОВЕРНУТИСЯ
ДО ЗМІСТУ

СПРИНЦІВКА ТИПУ А (з м'яким наконечником)

Призначена для спринцювання, іригації (зрошення).



Порожнисті балони грушоподібної форми з м'яким наконечником, що є одним цілим з балоном.

Залежно від номера спринцівки мають різні габарити і об'єм: меншому номеру відповідає менший об'єм.

Спринцівка А-1.....	35 мл
Спринцівка А-3.....	90 мл
Спринцівка А-6.....	210 мл
Спринцівка А-9.....	270 мл
Спринцівка А-12.....	360 мл
Спринцівка А-15.....	400 мл

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет, картонна коробка

 **Групове:**
гофрокороб А-1 – 150 шт.;
А-3 – 80 шт.; А-6 – 90 шт.;
А-9 – 80 шт.; А-12 – 70 шт.;
А-15 – 70 шт.

Спринцівка Ae-0.....	8 мл
Спринцівка Ae-3.....	30 мл
Спринцівка Ae-5.....	45 мл
Спринцівка Ae-7.....	80 мл
Спринцівка Ae-9.....	135 мл
Спринцівка Ae-11.....	210 мл
Спринцівка Ae-13.....	330 мл
Спринцівка Ae-15.....	500 мл
Спринцівка Ae-16.....	700 мл

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет, картонна коробка

 **Групове:**
гофрокороб
Ae-3 – 150 шт.; Ae-5 – 110 шт.;
Ae-7 – 80 шт.; Ae-9 – 40 шт.;
Ae-11 – 80 шт.; Ae-13 – 60 шт.;
Ae-15 – 50 шт.; Ae-16 – 40 шт.

Термін зберігання - 4 роки з дати виготовлення

Термін експлуатації - 12 місяців з дня вводу в експлуатацію

СПРИНЦІВКА ТИПУ Б (з твердим наконечником)

Призначена для спринцювання, іригації (зрошення).



Порожністі балони грушоподібної форми з твердим пластмасовим наконечником, який від'єднується від балона. Залежно від номера спринцівки мають різні габарити і об'єм: меншому номеру відповідає менший об'єм.

Спринцівка Б-0.....	10 мл
Спринцівка Б-1.....	35 мл
Спринцівка Б-3.....	90 мл
Спринцівка Б-6.....	210 мл
Спринцівка Б-8.....	240 мл
Спринцівка Б-9.....	270 мл
Спринцівка Б-12.....	360 мл
Спринцівка Б-15.....	400 мл

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет

 **Групове:**
гофрокороб Б-1 – 150 шт.;
Б-3 – 60 шт.; Б-6 – 100 шт.;
Б-8 – 110 шт.; Б-9 – 90 шт.;
Б-12 – 70 шт.; Б-15 – 70 шт.

Спринцівка Бе-0 (краплелічильник).....	6 мл
Спринцівка Бе-1.....	25 мл
Спринцівка Бе-3.....	40 мл
Спринцівка Бе-5.....	95 мл
Спринцівка Бе-7.....	140 мл
Спринцівка Бе-9.....	250 мл
Спринцівка Бе-11.....	360 мл
Спринцівка Бе-13.....	520 мл
Спринцівка Бе-16.....	760 мл

Термін зберігання - 4 роки з дати виготовлення

Термін експлуатації - 12 місяців з дня вводу в експлуатацію

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет, картонна коробка

 **Групове:**
гофрокороб Бе-1 – 150 шт.; Бе-3 – 130 шт.;
Бе-5 – 60шт.; Бе-7 – 40 шт.; Бе-9 – 70 шт.; Бе-11 – 60 шт.;
Бе-13 – 44 шт.; Бе-16 – 40 шт.

СПРИНЦІВКА ТИПУ Б виконання ІБ (жіночий душ)

Спринцівка пластизольна використовується для спринцювання, іригації (зрошення) і відсмоктування рідини з порожнин організму та використовується багаторазово.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порожністі балони овальної форми з вигнутим еластичним наконечником, який вкручується і забезпечує міцну герметичність балона (тип ІБ)

Об'єм: 300 мл

Термін зберігання - 4 роки з дати виготовлення

Термін експлуатації - 12 місяців з дня вводу в експлуатацію



ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:

полімерний пакет, картонна коробка




Групове:

гофрокороб
полімерний пакет - 70 шт.
картонна коробка - 48 шт.

МАТКОВІ КІЛЬЦЯ



Призначені для корекції вираженого пролапсу геніталій. _____

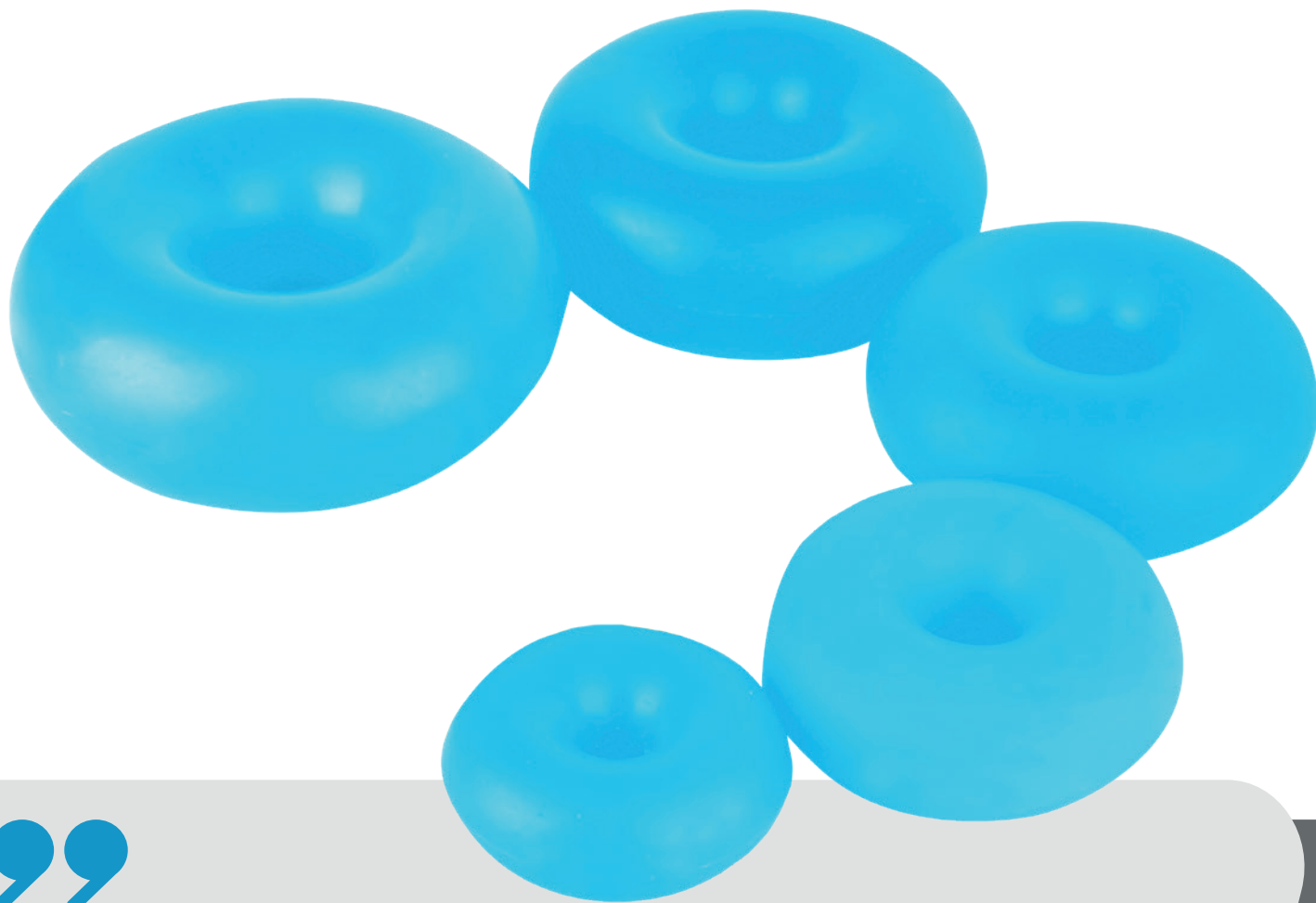

Виготовляються з високоякісного полівінілхлориду з додаванням інертних барвників у відповідності з технічними умовами підприємства, сертифіковані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Асортимент виробів включає кільця шести розмірів, що відрізняються площею поперечного перетину, зовнішнім і внутрішнім діаметром і кольором:

№	ДІАМЕТР, мм	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм
0	53,5	10
1	63,5	14
2	66,4	16,3
3	79	19,4
4	88,8	20
5	99	28

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



Групове:
гофрокороб №0 – 80 шт.; №1 – 200 шт.; №2 – 180 шт.;
№3 – 120 шт.; №4 – 80 шт.; №5 – 60 шт.

Термін зберігання - 24 місяці з дати виготовлення

Термін експлуатації - 3 місяці дня вводу в експлуатацію

БАНКИ МАСАЖНІ полікарбонатні

Для впливу на крово- і лімфообіг. Викликають місцеве рефлекторне розширення кровоносних і лімфатичних судин.



ПЕРЕВАГИ

Колба масажної банки виконана з високоякісного матеріалу – полікарбонату (міцний надійний матеріал, який не трісне і не сколеться при проведенні масажу)

Надає вакуумно-присмоктуючий і термохімічний вплив на шкіру, підшкірну клітковину, м'язи, нерви, біологічно активні точки, меридіани, рефлекторні зони органів.

Банки використовують для профілактики і лікування застудних захворювань, захворювань легенів, остеохондрозів, радикулітів, вегетосудинної дистонії, міжреберної невралгії, для лікування целюліту та ожиріння

Термін зберігання - 3 роки з дня виготовлення

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
картонна коробочка по 2 шт.



Групове:
гофрокороб – 34 коробочки по 2 шт.

КОЛО ПІДКЛАДНЕ

Використовується в якості «подушки» на стілець або крісло, для забезпечення балансу і фізичної координації під час сидіння; для тренування м'язів спини і нижнього таза (при реабілітації); для профілактики та догляду за пролежнями.



ПЕРЕВАГИ

Регулюється по жорсткості і висоті
Не містить алергічних і токсичних компонентів
Просте в експлуатації

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал: полівінілхлорид
Розмір: 300x100x60 мм

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектується ручним насосом з наконечником
для надування кола

Термін зберігання - 4 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет

 **Групове:**
гофрокороб – 10 шт.

БАЛОН ДЛЯ ТОНОМЕТРА із ПВХ

Призначення: для створення надлишкового тиску та його плавного скидання в манжеті приладу для вимірювання артеріального тиску (тонометра).



Матеріал: ПВХ

Термін зберігання -
4 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ



Групове:
гофрокороб – 200 шт.

ТРУБКИ МЕДИЧНІ

гумові

ТИП 1 – призначена для виготовлення систем при отриманні компонентів і препаратів крові та використання в ін'єкційних вузлах пристроїв переливання крові та її компонентів (одноразового застосування). Стійка до одноразової стерилізації паром.

ТИП 3 – вакуумна, призначена для застосування у виробництві вакцин, сироваток, бактерійних і вірусних препаратів. Стійка до десятиразової стерилізації паром.

ТИП 6 – призначена для з'єднання складових частин медичних приладів за умови відсутності безпосереднього контакту трубок з тканинами і внутрішніми середовищами організму, рідкими і газоповітряними сумішами, які надходять в організм. Стійка до дезінфекції.



ПЕРЕВАГИ

Виготовлені з гумової суміші, дозволеної до використання органами охорони здоров'я
Безпечні в експлуатації для здоров'я людини
Різноманітна кольорова гамма

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 1 – розміри, мм: внутрішній діаметр – 5,0; 8,0; товщина стінки – 1,5; 2,0

ТИП 3 – розміри, мм: внутрішній діаметр – від 3,0 до 25,0; товщина стінки – від 1,0 до 10

ТИП 6 – розміри, мм: внутрішній діаметр – від 6,0 до 20,0; товщина стінки – від 1,5 до 5,0

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації:

тип 1 – одна стерилізація;

тип 3 – 6 місяців з дня введення їх в експлуатацію при гарантійному напрацюванні
не більше 10 стерилізацій;

тип 6 – 12 місяців за умови не більше однієї стерилізації щодня

Гарантійний термін експлуатації трубок встановлюється в межах гарантійного терміну зберігання.

ПАКУВАННЯ Групове



ТИП 1 – не менше 5 кг згортають у бухту і укладають в гофрокороб
ТИП 3 – не менше 50 кг згортають у бухту і укладають в мішок
ТИП 6 – не менше 25 кг згортають у бухту і укладають в мішок



ПОВЕРНУТИСЯ
ДО ЗМІСТУ

ТРУБКИ МЕДИЧНІ

СИЛІКОНОВІ

Використовуються в медичній та фармацевтичній промисловості як кровопровідні магістралі в апаратах екстракорпорального кровообігу, для виготовлення дренажів у загальній хірургії, для переливання крові, кровозамінників, інфузійних розчинів, для комплектації насосних та інших медичних пристроїв



ПЕРЕВАГИ:

Виготовлені з високоякісного силікону. Термостійкі, піддаються багаторазовій стерилізації (зокрема гарячим повітрям та водяною парою), не втрачаючи своїх властивостей.

Відрізняються винятковою гнучкістю, еластичністю, міцністю та хімічною інертністю.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубки силіконові зберігають свої властивості при температурах від -60°C до $+200^{\circ}\text{C}$ (короткочасно до $+300^{\circ}\text{C}$). Стійкі до впливу морської та прісної води, розчинів солей, спиртів, фенолів, мінеральних масел, кислот та лугів, перекису водню, озону, радіації, УФ-випромінювань тощо.

Виготовляються внутрішнім діаметром від 1 мм до 35 мм із товщиною стінки від 0,4 мм до 5 мм.

Трубки силіконові: дренажні одно- та багатоканальні, для слухових апаратів виготовляються внутрішнім діаметром від 5 мм до 8 мм, зовнішнім – від 7 мм до 11 мм.

Варіанти перерізів силіконових трубок: дренажних та для слухових апаратів



Гарантійний термін зберігання - 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



Групове:
бухта: від 5 кг до 7 кг



АПТЕЧКА МЕДИЧНА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ІНДИВІДУАЛЬНА (АМЗІ)

Призначена для надання доклінічної допомоги потерпілим в екстремальних і бойових умовах. Аптечка використовується для комплектування особового складу збройних сил, підрозділів спецпризначення, поліції, ДСНС, а також цивільних служб.

- Розроблена в повній відповідності до стандартів НАТО і вимог МО України
- Зручна конструкція сумки, водонепроникна
- Може комплектуватися відповідно до вимог замовника




КОМПЛЕКТНІСТЬ:

1. Бинт марлевий стерильний завширшки 14 см, завдовжки 7 м - 1 шт.
2. Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою - 1 шт.
3. Лейкопластир на нетканій основі завширшки 3 см, завдовжки 500 см - 1 шт
4. Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом) - 1 шт.
5. Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні (розмір L) - 1 пара
6. Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки 160 см, завдовжки 210 см - 1 шт.
7. Засіб для зупинки кровотечі механічний по типу "CAT" - 1 шт
8. Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) - 1 шт
9. Маркер водостійкий для нанесення інформації - 1 шт
10. Назофарингеальний повітровід (повітропровід, трубка) з лубрикантом - 1 шт.
11. Футляр аптечки (сумка-укладка медична) - 1 шт.

ПОВ'ЯЗКА ОКЛЮЗІЙНА (торакальна грудна наліпка)

Призначена для використання при зовнішньому відкритому пневмотораксі для перешкоджання потраплянню повітря в рану (герметизації проникаючих поранень грудної клітки).

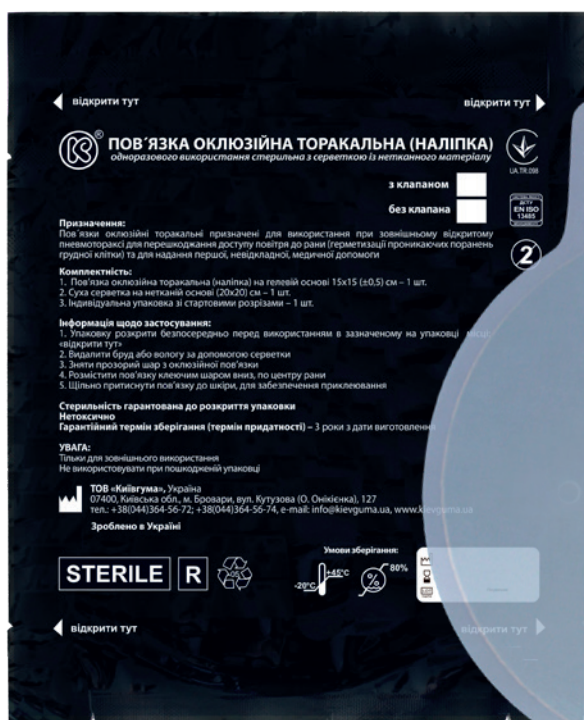

ПЕРЕВАГИ

Легко відкривається завдяки насічкам на упаковці
Може комплектуватися відповідно до вимог замовника

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пов'язка оклюзійна виготовлена з повітронепроникних матеріалів високої щільності на гелевій основі.
Стерильна
Діаметр пов'язки: 160±10 мм
Розмір клейового шару: не менше ніж 140x140 мм (ДхШ)
Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення
Температурний режим експлуатації: від -30°C до +45°C
Виготовляється двох видів:
Оклюзійна пов'язка з клапаном та без клапану.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Оклюзійна пов'язка – 1 шт
Серветка – 1 шт

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
металізований
полімерний пакет з насічками



ДЖГУТ КРОВОСПИННИЙ ГУМОВИЙ “Омега”

Для тимчасової зупинки кровотечі на відповідній ділянці тіла людини, а також для накладання щільної пов'язки або еластичного бинта.



ПЕРЕВАГИ

Простий і універсальний кровоспинний засіб
Має по всій довжині повторювані зображення, що дозволяють контролювати ступінь розтягнення
Комплектується стрічкою-браслетом для зазначення даних про постраждалого і час накладення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виготовляється відповідно до ТУ У 22.1-35115248-008:2016
Представляє собою еластичну гумову стрічку з розмірами, мм:
довжина – 1400±50; ширина – 95±3; товщина – 0,70±0,20
Термін зберігання - 5 років з дати виготовлення

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Джгут гумовий
Стрічка-браслет із поліпропілену для нанесення інформації про постраждалого

ПАКУВАННЯ

 Індивідуальне:
герметичний полімерний пакет

МАРЛЯ СПРЕСОВАНА стерильна

Марля спресована стерильна являє собою багат шаровий спресований бавовняний матеріал білого кольору. Використовується для виготовлення допоміжних гігроскопічних засобів при операціях, перев'язках, а також для тампонування ран при наданні невідкладної медичної допомоги. Марля стерильна призначена для одноразового використання. Марля не викликає алергічних реакцій.



ПЕРЕВАГИ

Марля спресована стерильна укладена таким чином, щоб під час надання домедичної допомоги можна було максимально швидко та ефективно тампонувати рану. Марля є суцільним полотном, тому нею не тільки зручно тампонувати рану, але й легко видаляти з рани, на відміну від звичайних марлевих подушечок.

Марля спресована стерильна укладена у вакуумну упаковку, що підвищує стійкість пакування до механічних пошкоджень (а відтак втрати стерильності) та робить виріб максимально мобільним.

При транспортуванні та експлуатації необхідно уникати високих температур та вологи.

**Увага! При наявності пошкоджень упаковки – не використовувати.
Стерильність гарантована до розкриття упаковки.**

Термін зберігання - 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
герметичний полімерний
пакет з насічками



ПОВЕРНУТИСЯ
ДО ЗМІСТУ

ПАКЕТ ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ бандаж

Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичними компресійними компонентами першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою кровоспинний. Призначений для надання медичної допомоги при пораненнях, для перев'язування ран і забезпечення ефективного тиску на джерело кровотечі.



ПЕРЕВАГИ

Пакет перев'язувальний є стерильним виробом
Упаковка має стартові надрізи для полегшення розкриття

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пакет перев'язувальний складається з еластичного бинта, однієї або двох поглинаючих подушок і пластикових фіксаторів. Поглинаюча подушка призначена для вбирання крові та має розмір не менше ніж 10х10см.

Пластикові фіксатори використовуються для додаткового тиску на рану і фіксації еластичного бинта (затискач для фіксації бинта).



ПАКУВАННЯ

Індивідуальне:
вакуумна, захисна вологостійка упаковка

Термін придатності - 3 роки з дати виготовлення

НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОВІД

Повітровід назофарингеальний призначений для відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів. За своєю формою повітровід представляє собою еластичну прозору трубку зі скошеним краєм з одного боку і розширенням з іншого та кільця, яке можна пересувати вздовж трубки.

Кільце дозволяє швидко фіксувати необхідну довжину введення повітроводу у носоглотку.

ПЕРЕВАГИ

Анатомічної форми, використовується для обох назальних порожнин
Еластичний, з додатковим проміжним амортизаційним отвором
Стопорне кільце, завдяки якому регулюється глибина введення
Комплектується гелем-лубрикантом для полегшення введення в носовий прохід
Стерильний, упакований в індивідуальну упаковку
Одноразового використання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОВІД З ПВХ, прозорий	НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОВІД З ТЕП, блакитний
Матеріал	ПВХ	ТЕП
Розміри	№ 28, № 30	№26, №28, №30, №32, №34
Колір	Прозорий	Блакитний
Температура експлуатації	від +5°C до +55°C	від -30 C до +55 C
Комплектація	Без лубриканту	З лубрикантом

РОЗМІР	ДОВЖИНА ДУГИ, мм граничне відхилення + 5,0	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм граничне відхилення - 0,1; +0,3	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм граничне відхилення - 0,1; +0,3
26	140,0	8,7	6,5
28	155,0	9,3	7,0
30	165,0	10,0	7,5
32	170,0	10,7	8,0
34	175,0	11,3	8,5

ПАКУВАННЯ

-  **Індивідуальне:**
стерильний металізований полімерний пакет з насічками
-  **Групова:**
гофрокороб

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виготовлення

НОЖИЦІ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ (атравматичні)


Призначені для швидкого і безпечного розрізання одягу та взуття пораненого при наданні першої доклінічної допомоги.



ПЕРЕВАГИ

Виготовлені з міцної нержавіючої сталі

Одне з лез ножиць має тупий наконечник, що перешкоджає травмуванню потерпілого

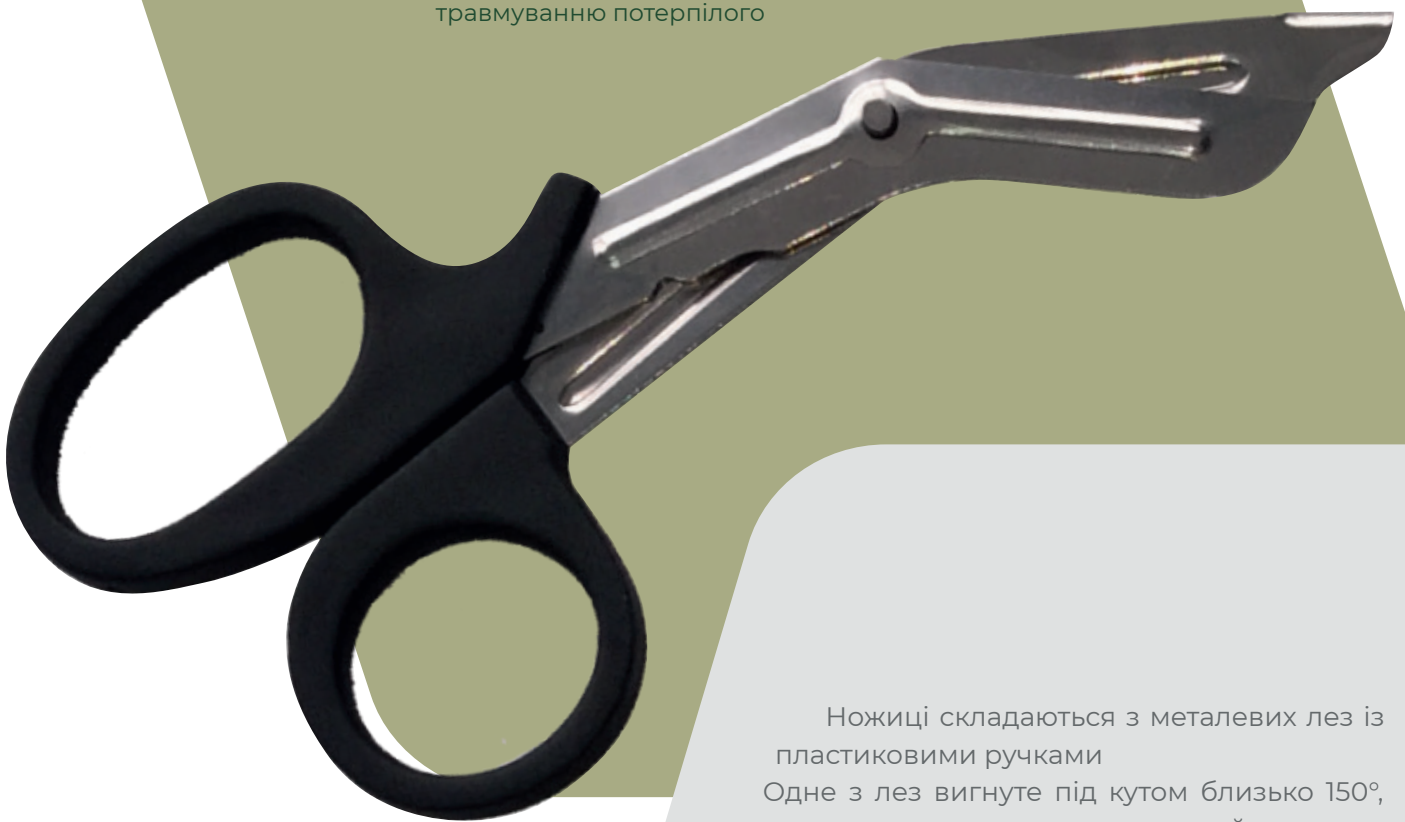

Ножиці складаються з металевих лез із пластиковими ручками

Одне з лез вигнуте під кутом близько 150°, що дозволяє використовувати цей вигин як важіль при розрізанні.

Використовуються для розрізання різних міцних матеріалів, таких як ремені автокрісла, шкіра, джинсова тканина і навіть тонкий метал.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тільки для зовнішнього використання
Довжина ножиць: 19 см


Гарантійний термін зберігання - необмежений

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
поліетиленовий пакет

ПОКРИВАЛО РЯТУВАЛЬНЕ (термоковдра)

Призначене для укутування потерпілого з метою захисту від переохолодження або перегріву при наданні першої допомоги в надзвичайних ситуаціях.

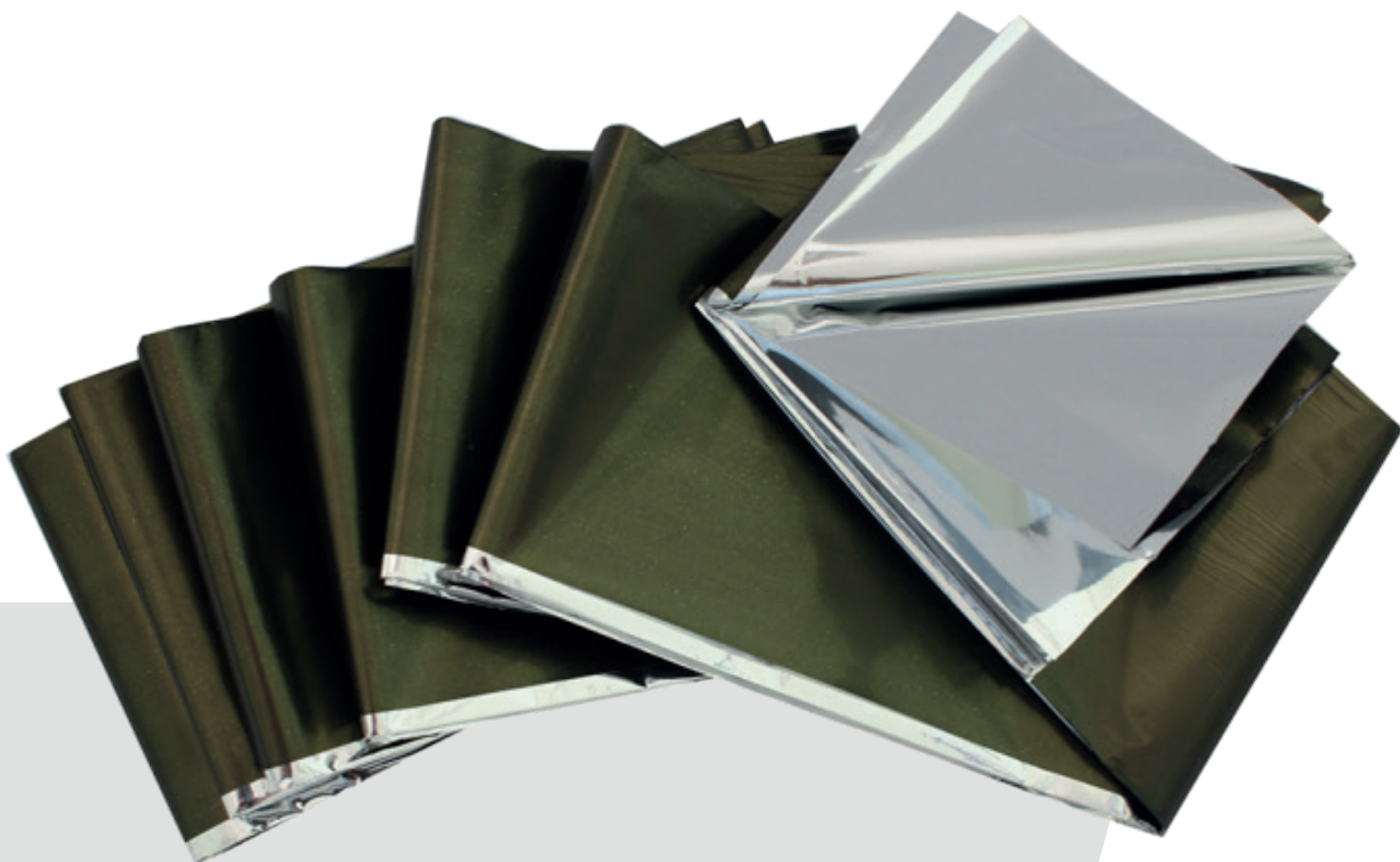

ПЕРЕВАГИ

Легке, міцне, компактне

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри, не менше: 210x160 см

Гарантійний строк зберігання - необмежений

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
поліетиленовий пакет

ГУМОВА ПЕТЛЯ FITNESSGUMA

Фітнес-петля – універсальний аксесуар для тренувань будь-якого рівня складності. Дозволяє поліпшити гнучкість, збільшити силу м'язів, при цьому мінімізувати навантаження на суглоби і зменшити ризик травм.



ПЕРЕВАГИ

Петля FITNESSGUMA виконана з міцної, водночас дуже еластичної гуми, до складу якої входять компоненти, що захищають виріб від старіння та інших фізичних впливів.

Для безпечного та ефективного пропрацювання усіх груп м'язів рекомендуємо використовувати фітнес-петлі різного рівня навантаження (жовту та помаранчеву для вправ на руки та корпус, червону – для вправ на ноги та сідниці).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень опору: 15-20, 25-30, 35-40 кг.

Колір: жовтий, помаранчевий, червоний.

Довжина: 208 см;

ширина: 14, 21, 28 мм;

товщина: 4,5 мм.

Термін придатності – необмежений


ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
картонна коробка з європетлею

 **Групове:**
гофрокороб – 22 шт.

НАБІР ФІТНЕС-ГУМОК з 5 штук FITNESSGUMA

Завдяки використанню гумок всіх рівнів опору можна пропрацювати різні групи м'язів. Окрім того, фітнес-гумки відмінно підходять не лише для силових тренувань, але для занять з пілатесу, йоги, тощо.

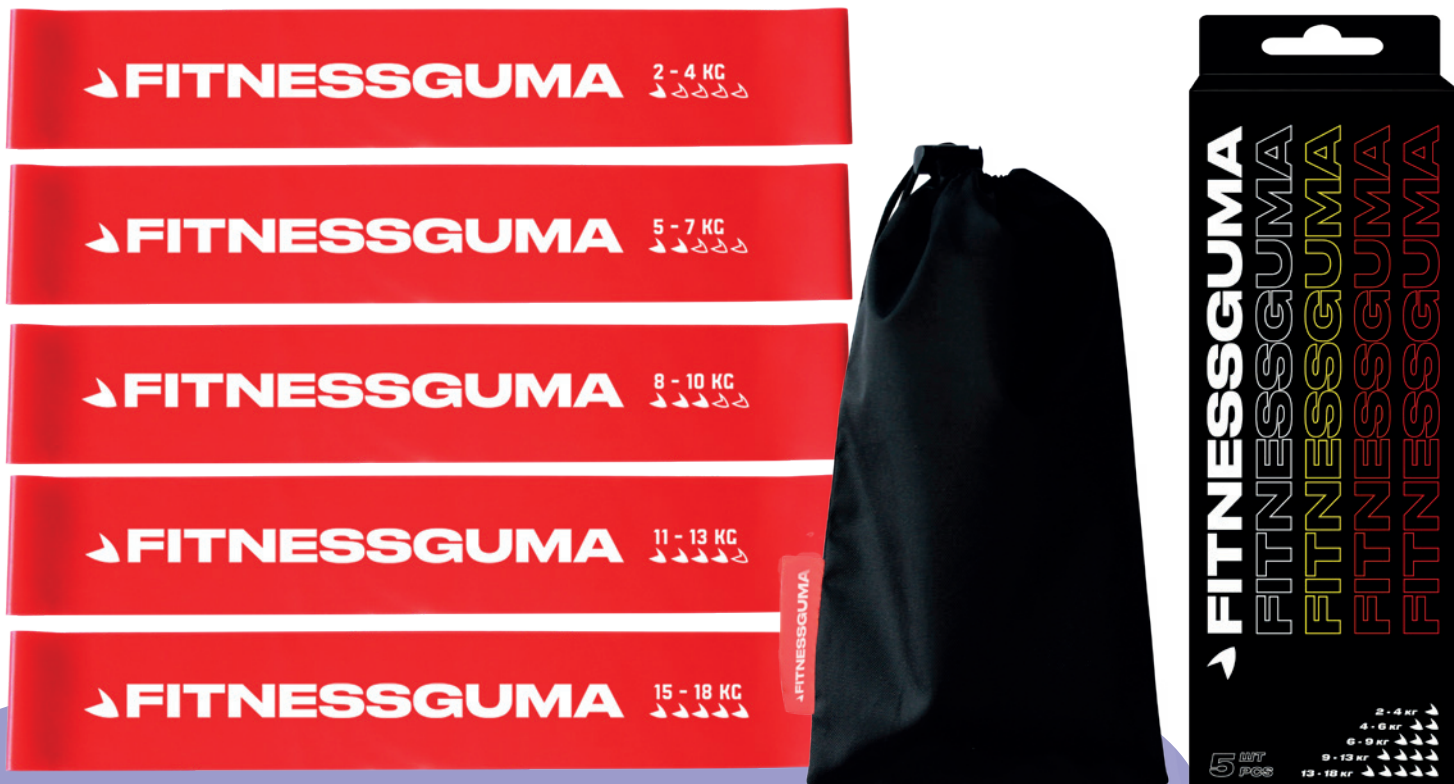

ПЕРЕВАГИ

Допомагають урізноманітнити вправи, уникаючи звикання м'язів

Можливість самостійно контролювати рівень навантаження

Кожна фітнес-гумка має позначення, що відповідають рівню навантаження:

2-4 кг

5-7 кг

8-10 кг

11-13 кг

15-18 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

колір: червоний, довжина: 600 мм,

ширина: 50 мм

Комплектація: 5 фітнес-гумок, мішечок для зберігання,
вкладиш із запропонованими вправами

Гарантійний термін зберігання - необмежений

ПАКУВАННЯ


 **Індивідуальне:**
картонна коробка з європетлею

 **Групове:**
гофрокороб - 28 шт



ЕСПАНДЕРИ КИСТЬОВІ FITNESSGUMA в асортименті

Призначені для відновлення рухових функцій рук після травм, пошкоджень сухожиль та для реабілітації після переломів; для зміцнення м'язів кисті та передпліччя.

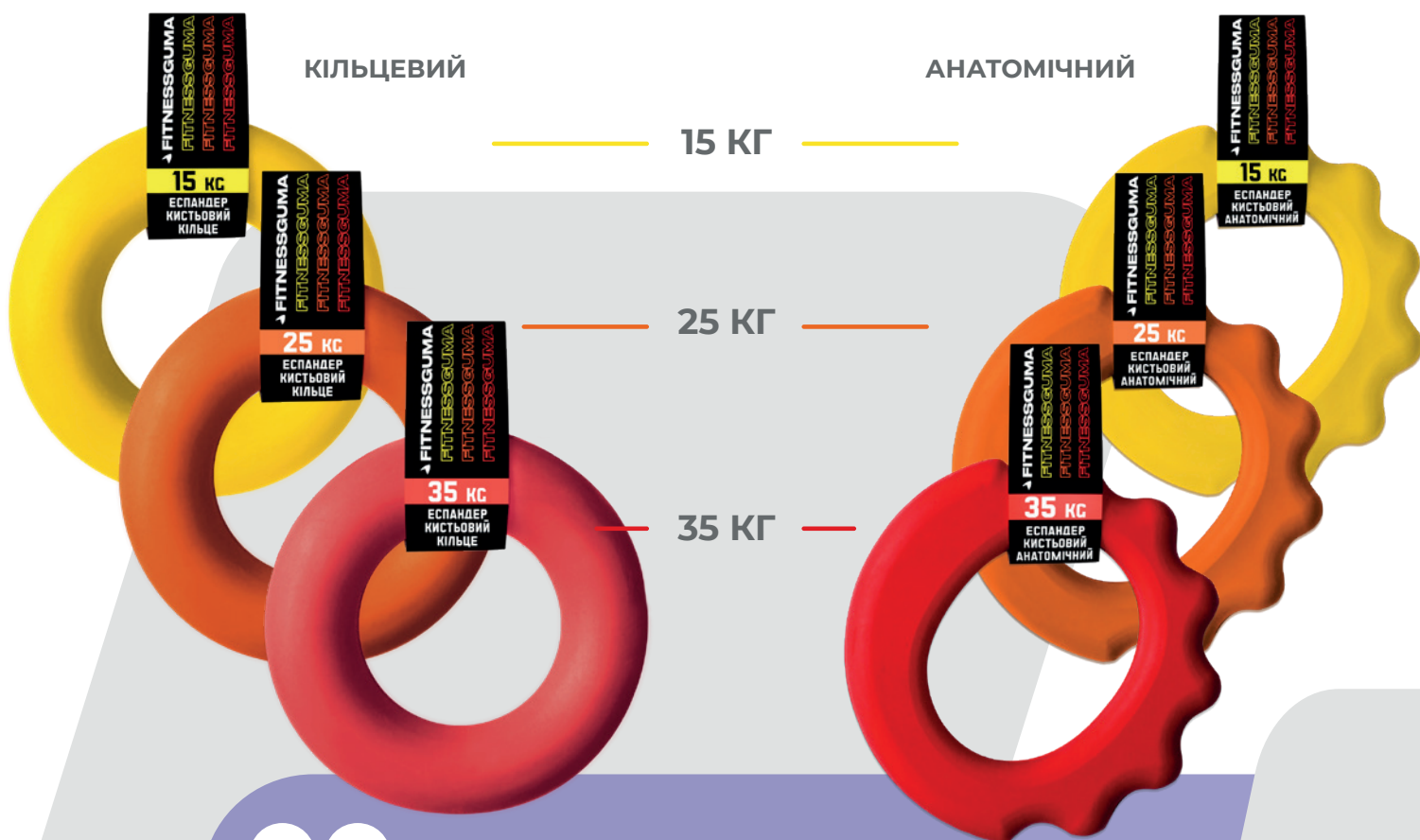

ПЕРЕВАГИ

Зміцнює і знімає неприємні відчуття з кисті руки; тренує м'язи кисті та передпліччя; нормалізує кровообіг кисті; можна використовувати в будь-якому місці і в будь-який час, займає мало місця і легко поміщається в кишеню.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Еспандер анатомічний:

Зовнішній діаметр – 90 мм; внутрішній діаметр овалу – 55 × 44 мм;
товщина – 18 мм; вага – 87 г.

Еспандер кільцевий: зовнішній діаметр – 72 мм; внутрішній діаметр – 30 мм;
товщина – 17 мм; вага – 92 г.

Ступінь твердості

м'який
середній
жорсткий

Рівень навантаження, кг

15
25
35

Колір

жовтий
помаранчевий
червоний

ПАКУВАННЯ


-  **Індивідуальне:**
картонний ярлик з європідвісом
-  **Групова:**
гофрокороб

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення



М'ЯЧ МАСАЖНИЙ FITNESSGUMA в асортименті

М'яч використовується для тренування м'язів та масажу рефлекторних зон. Сприяє збільшенню м'язового тону та тону шкіри, зменшенню венозної застійності та прискоренню кровообігу, покращенню функціонування центральної нервової системи. Допомогає відновити чутливість кінцівок після хірургічного втручання.

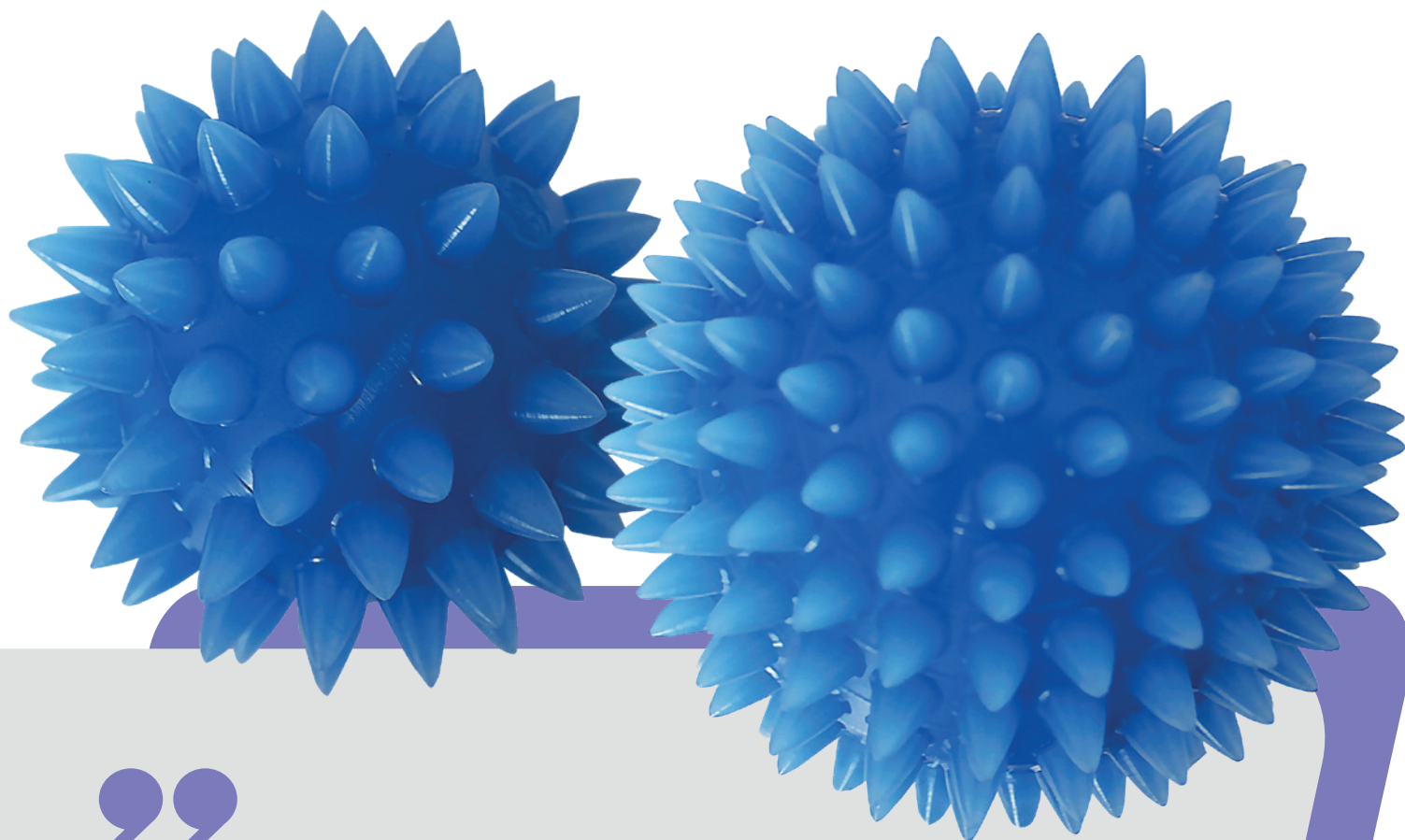

М'яч виконаний без внутрішнього наповнення і не вимагає додаткового прокачування.

Матеріал: ПВХ

Діаметр: 45, 60, 70 мм.

Гарантійний термін зберігання - 4 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет
картонний ярлик з європідвісом






Групова:
гофрокороб.

Пробки гумові медичні призначені для закупорювання флаконів з кров'ю, кровозамінником, інфузійними розчинами, гемоконсервантами, консервованою кров'ю, її компонентами та препаратами, рідкими і сухими ін'єкційними ендокринними, пеніциліновими, бактеріологічними та біологічними препаратами, і всіх видів розчинів лікарських препаратів внутрішнього і зовнішнього застосування, а також для ліофілізації біологічних препаратів.





У залежності від призначення пробки виготовляються чотирьох типів:

Тип 1 – пробка для закупорювання пляшок з кровозамінниками, інфузійними розчинами, гемоконсервантами, консервованою кров'ю, її компонентами та препаратами, а також усіх видів розчинів лікарських препаратів внутрішнього і зовнішнього вживання, які залежно від конструкції виготовляються у виконаннях: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6.

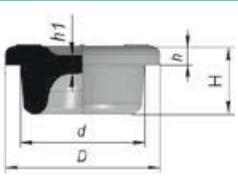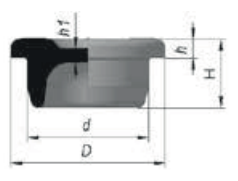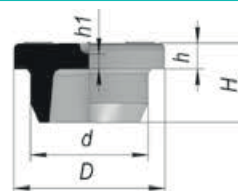ПРОБКА тип 1						
ВИКОНАННЯ	розміри, мм					КОНФІГУРАЦІЯ ПРОБКИ
	D	d	H	h	h1	
 Виконання 1	33,6-0,6	26,5±0,3	14,5 ⁺¹	4 ⁺¹	4,2	 А
 Виконання 2	33,6-0,6	26,5±0,3	14,5 ⁺¹	4 ^{+0,8} _{-0,2}	3,5	 А
 Виконання 3	31±0,3	24,2±0,2	16,2±0,3	5,2±0,2	2,7	 В



ПРОБКА тип 1

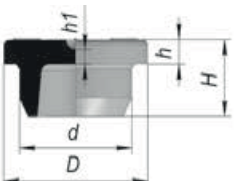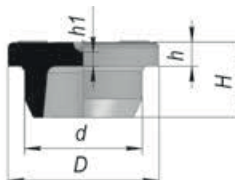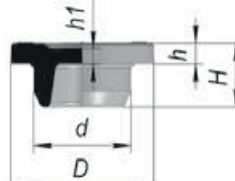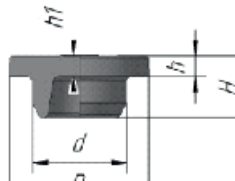ВИКОНАННЯ	розміри, мм					КОНФІГУРАЦІЯ ПРОБКИ
	D	d	H	h	h1	
 Виконання 3А	31±0,3	24,2±0,2	12,2±0,3	4±0,3	1,6	 В
 Виконання 4	29,6±0,2	-	5±0,4	-	1	 С
 Виконання 5	31±0,2	23,6±0,2	12,2±0,4	4±0,3	3,6	 Н
 Виконання Б	26,5±0,25	17,8±0,15	11,6±0,4	3,8±0,3	2,8	 А
 Виконання 6	26,5±0,25	17,8±0,15	11,6±0,4	3,8±0,3	3,8±0,3	 Е

Залежно від способу обробки пробки можуть бути необробленими (N) та готовими до стерилізації (RS)

Гарантійний термін зберігання пробок - 3 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

**Індивідуальне:**

N, RS – полімерний пакет; RS – стерилізаційний пакет

**Групове:**

гофрокороб залежно від типу та виконання: N – від 1,5 тис. шт. до 9 тис. шт.;



RS (п/п) – від 1,2 тис. шт. до 7,5 тис. шт.;

RS (с.п.) – від 1,2 тис.шт. до 8 тис. шт.

Тип 2 – пробка для закупорювання ін'єкційних форм антибіотиків, бактеріологічних і біологічних препаратів, лікарських препаратів внутрішнього і зовнішнього вживання, які залежно від конструкції виготовляються у виконаннях: 1, 2, 2А, 3, 3А.

ПРОБКА тип 2						
ВИКОНАННЯ	розміри, мм					КОНФІГУРАЦІЯ ПРОБКИ
	D	d	H	h	h1	
Виконання 1	19 ^{-0,5}	13,4 ^{+0,2}	8 ^{+0,5}	3 ^{+0,3} _{-0,2}	4	 D
Виконання 2	18,8±0,2	13,2 ^{+0,3} _{-0,1}	8,8±0,3	3,3±0,25	2,3	 D
Виконання 2А	18,8±0,2	13,2 ^{+0,3} _{-0,1}	8,8±0,3	3,3±0,25	1,75±0,25	 F
Виконання 3	13 ^{+0,2}	8,2 ^{+0,3}	7 ^{+0,2}	2,5 ^{+0,1}	3,5	 E
Виконання 3А	12,5±0,2	7,5±0,1	7±0,25	2±0,25	2	 D

Тип 3 – пробка для закупорювання препаратів, одержуваних методом ліофілізації, які залежно від конструкції виготовляються у виконаннях: 1, 2.

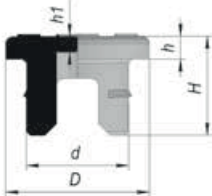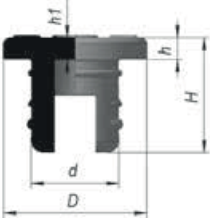ПРОБКА тип 3						
ВИКОНАННЯ	розміри, мм					КОНФІГУРАЦІЯ ПРОБКИ
	D	d	H	h	h1	
 Виконання 1	18,8±0,3	13,3±0,3	13±0,3	3 ^{+0,2} _{-0,3}	2	 D
 Виконання 2	12,5±0,2	7,5±0,1	10,2±0,25	2±0,25	2	 D

Тип 4 – пробка для закупорювання препаратів промислового і аптечного приготування з терміном придатності не більше 1 року, що повторюють конструкції пробок – типу 1, типу 2, типу 3.

Залежно від способу обробки пробки можуть бути необробленими (N) і готовими до стерилізації (RS).

Примітка. Забороняється закупорювання всіма видами пробок етилового ефіру, скипідару, фенолу, метилсаліцилу, хлоретилу, хлороформу, чотирехлористого вуглецю і мінерального масла.

Гарантійний термін зберігання пробок – 3 роки з дати виготовлення.

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:

N, RS – полімерний пакет; RS – стерилізаційний пакет



Групове:

гофрокороб залежно від типу та виконання: N – від 1,5 тис.шт до 9 тис.шт;

RS (п/п) – від 1,2 тис. шт до 7,5 тис. шт;

RS (с.п.) – від 1,2 тис.шт до 8 тис.шт

КОВПАЧКИ ЗАХИСНІ ПЛАСТИКОВІ З ДИСКАМИ ДЛЯ ФЛАКОНІВ З ЛІКАМИ

Призначені для пластикових флаконів з лікарськими засобами, що виготовляються методом видування-наповнення-запаювання.

Ковпачки з дисками наварюються на флакони, при цьому лікарські засоби не контактують із гумовими або термоеластопластичними дисками.

Сфера застосування: фармакологія, медицина.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Залежно від конструкції та застосування ковпачки з дисками випускаються у різних виконаннях

Гарантійний термін зберігання ковпачків з дисками

– 3 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:

поліетиленовий мішок



Групове:

гофрокороб - 1 тис. шт.



СОСКИ-ПУСТУШКИ латексні та каучукові



Для задоволення смоктального рефлексу і заспокоєння дітей

Класична
кругла форма

Натуральний
латекс



ПЕРЕВАГИ

Виготовлені з високоякісного натурального латексу та каучука
М'яка і еластична, швидко набуває температури тіла.

Завдяки класичній формі і м'якій структурі балончика імітують форму соски матері

Яскрава, зручна, безпечна фурнітура

Мають вентиляційні отвори для запобігання утворення подразнень навколо рота дитини

Не містять «Бісфенол-А»

СОСКИ-ПУСТУШКИ латексні та каучукові



 Класична
кругла форма

 Натуральний
латекс



«ЯГОДКА»



«ШАЛУН»



з ковпачком



«ЛАСУН»



 Ортодонтична
форма

 Натуральний
каучук



«ШАЛУН»



«СЕРЬГА»



«БАНТИК»



«АНЮТА»



Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

Індивідуальна:



картонна
коробка



полімерний пакет
з європетлею



блістер



полімерний пакет
з картоним європідвісом



Групова (гофрокороб)

для блістера - 96 шт
для полімерного пакета
з європетлею - 220 шт; 250 шт
в коробочках - 220 шт
для полімерного пакета
з картоним європідвісом - 150 шт

СОСКИ-ПУСТУШКИ СИЛІКОНОВІ



Ортодонтична
форма



Високоякісний
силікон



ПЕРЕВАГИ

Виготовлена з високоякісного силікону.

Пластикова фурнітура не містить «Бісфенол-А».

Сприяє формуванню правильного прикусу у дитини.

Не має ні запаху, ні смаку, не викликає алергічної реакції, міцна та довговічна.

Скіс нижньої поверхні ортодонтичної соски, а також натиск язика змушують нижню щелепу рухатися вперед і назад, що сприяє правильному розвитку щелепно-лицьового апарату дитини. Разом із розвитком нижньої щелепи і заспокоєнням дитини ортодонтична пустушка також формує правильний прикус. Стієка до багаторазової дезінфекції.

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації - 1 місяць

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
блістер



Групове:
гофрокороб – 120 шт.

«ВЕСЕЛИЙ
МЕТЕЛИК»



«МАЛИНКА»
БЕЗ КІЛЬЦЯ



«КОЛЬОРОВІ
СНИ»




«САША»



«ЧАРІВНА
КВІТОЧКА»



«СОНЯЧНА
ПОСМІШКА»

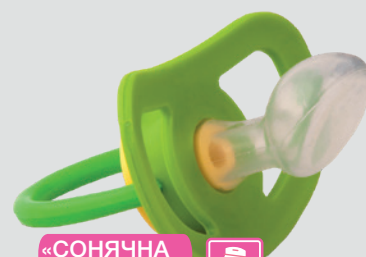

АКСЕСУАРИ

■ ЛАНЦЮЖОК ДЛЯ СОСКИ-ПУСТУШКИ

Для закріплення соски-пустушки.



ПЕРЕВАГИ

Оснащений зручною кліпсою, завдяки якій легко пристібається до нагрудника, до одягу дитини, до візочка, або до дитячого сидіння автомобіля.

Стійкий до багаторазової дезінфекції.

Випускається в декількох кольорах.

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення



ПАКУВАННЯ

Індивідуальне:
блістер

Групове:
гофрокороб – 120 шт.

■ ФУТЛЯР ДЛЯ СОСКИ-ПУСТУШКИ “КОЛОБОК”

Призначений для зберігання соски-пустушки для уникнення її забруднення.



ПЕРЕВАГИ

Може використовуватися як іграшка-брязкальце.

Легко кріпиться до візка, дитячого ліжечка, автомобільного крісла.

Стійкий до багаторазової дезінфекції.

Безпечний для дитини: зроблений з високоякісних довговічних нетоксичних матеріалів.

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

Індивідуальне:
полімерний пакет з картонним європідвісом

Групове:
гофрокороб – 50 шт.

АКСЕСУАРИ



■ МАСАЖЕР ДЛЯ ЯСЕН “РИБКА”

Для масажу ясен дитини в ранньому віці. _____



ПЕРЕВАГИ

- Має зручну форму, забезпечує м'яке масажування ясен
- Знімає дискомфорт під час прорізування зубів
- Виготовлений з натурального каучуку
- Можна використовувати як іграшку
- Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення
- Гарантійний термін експлуатації - не більше 1 року



ПАКУВАННЯ

- Індивідуальне:** блістер
- полімерний пакет з картоним європідвісом
- Групове:** гофрокороб – 50 шт.


■ ЩІТКИ

Комплект щіток призначений для очищення внутрішньої поверхні дитячих виробів для годування.

ПЕРЕВАГИ

- Можливо очистити будь-яку пляшку, поїльник, чашку, соски всіх типів.
- Не дряпає і не пошкоджує поверхню виробів.
- Підвісні щітки зручно зберігати і сушити.
- В комплект входять 2 щітки: для пляшечки; для соски молочної.

- Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення
- Гарантійний термін експлуатації - не більше 1 року

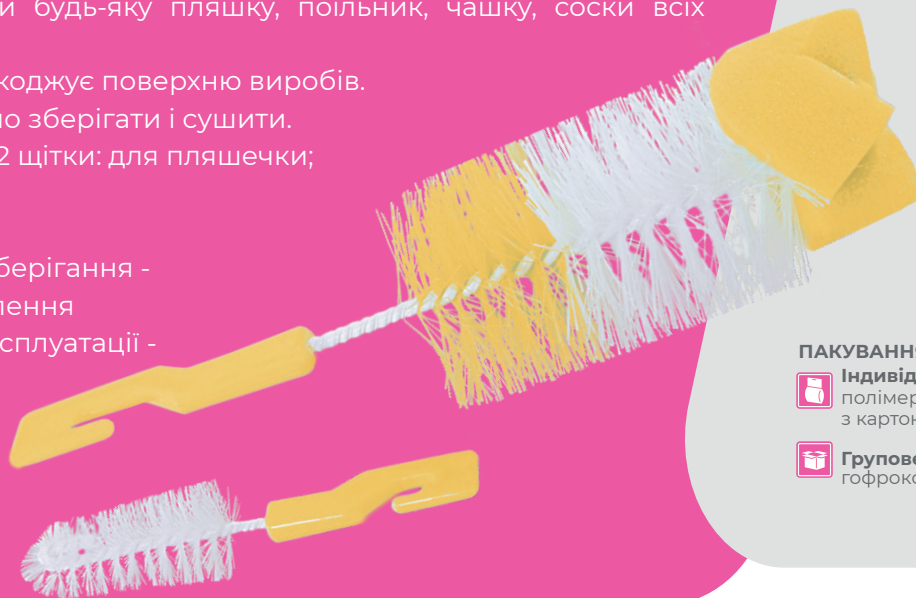

ПАКУВАННЯ

- Індивідуальне:** полімерний пакет з картоним європідвісом
- Групове:** гофрокороб – 40 шт.

АКСЕСУАРИ



■ ДИТЯЧИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИЙОМУ ЛІКІВ

Для полегшення та зручності подачі ліків малюкам. _____



ПЕРЕВАГИ

Окрім ліків комплект підійде для введення прикорму малюкам і різних профілактичних процедур. Стійкі до багаторазової дезінфекції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Складається з соски силіконової молочної та мензурки об'ємом 5 мл.

Гарантійний термін зберігання -

3 роки з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації -

1 місяць в лікувальних закладах та 6 місяців при індивідуальному застосуванні з дня одержання споживачем



ПАКУВАННЯ

Індивідуальне:
блістер

Групове:
гофрокороб – 90 шт

■ НАГРУДНИК ДИТЯЧИЙ З ПВХ-ПОКРИТТЯМ

Захищає одяг дитини від забруднення

ПЕРЕВАГИ

Водонепроникні нагрудники правильно підібраної конструкції надійно захищають малюка від забруднення, позбавляючи маму від зайвих турбот. Легко перуться

Комплект складається з 1-го або 3-х нагрудників.

Гарантійний термін зберігання -
3 роки з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації -
не менше 1 року



ПАКУВАННЯ

Індивідуальне:
полімерний пакет
з картоним європідвісом

Групове:
гофрокороб – 50 шт.

СОСКИ МОЛОЧНІ гумові та силіконові

Змінні соски для комплектів годування малюків



Мають класичну форму, для пляшечок з широким горлом

Гумова – виготовлена на основі натурального каучуку.

Силіконова – безбарвна без запаху і смаку, не змінює смак їжі і особливо підходить для дітей, що мають алергію на латекс.

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення

Гарантійний термін експлуатації сосок гумових – 1,5 місяців з дня одержання споживачем в межах гарантійного терміну зберігання

Гарантійний термін експлуатації сосок силіконових – 2 місяці

ПАКУВАННЯ (соска гумова)



Індивідуальна:
картонна коробка - 1 шт.



блістер - по 2 шт.



полімерний
пакет - по 2 шт.



Групова
гофрокороб: коробочка - 220 шт.
блістер - 90 шт.
полімерний пакет - 200 шт.

ПАКУВАННЯ (соска силіконова)



Індивідуальна:
блістер - по 2 шт.



Групова
гофрокороб - 90 шт.

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ГОДУВАННЯ з пляшечками з поліпропілену



Комплекти призначені для годування грудних дітей молочними продуктами, різними рідкими сумішами, соками, для проведення профілактичних процедур і для заспокоєння



Пляшечки виготовлені з якісного полімерного матеріалу, що не містить бісфенол-А
Дозволяє годувати дитину, максимально наблизивши штучне вигодовування до природного
Пляшечки виготовлені зі шкалою, що позначає її місткість
Пляшечки термічно стійкі і витримують перепад температур не менше 40°C
Стійкі до багаторазової дезінфекції
Гігієнічність соски забезпечує захисний ковпачок

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення

“Кошеня”



250 мл



125 мл

“Класік”



250 мл



125 мл

“Кошеня”



250 мл



125 мл

“Класік”



250 мл



125 мл

ПАКУВАННЯ



Індивідуальна:
ярлик з європетлею



Групово
125 мл - 25 шт., 30 шт.
250 мл - 25 шт., 35 шт.

У комплект входить соска, виготовлена з високоякісного силікону або гуми



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ З СИЛІКОНОВОЮ ПЛЯШЕЧКОЮ



Для годування маленьких дітей молочними сумішами, різними соками, іншими харчовими рідинами
Для індивідуального застосування і в лікувальних установах



ПЕРЕВАГИ

Пляшечка з ручками ідеальна для того, щоб ваша дитина навчилася пити самостійно

Виготовлена з високоякісного, нетоксичного матеріалу

Можна використовувати як контейнер для зберігання та замороження молока

Стійка до багаторазової дезінфекції

Комплект складається з м'якої силіконової пляшечки з ручками

Об'єм пляшечки – 125 мл

В комплект входять 2 соски з якісного силікону і пластикового колпачка

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення

«Кошеня»



ПАКУВАННЯ



Індивідуальна:
полімерний пакет
з картонним європідвісом



Групова:
гофрокороб - 25 шт

МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ універсальний



Призначений для зціджування молока у годуючих жінок безпосередньо в пляшечку, для подальшого годування дитини або зберігання зцідженого молока



КОМПЛЕКТНІСТЬ

Корпус молоковідсмоктувача з лійкою
Балон з 2-ма клапанами, краном для стравлювання повітря і для створення розрядження, трубкою для приєднання до пляшечки
Ущільнювальне кільце
Пляшечка об'ємом 125 мл в комплекті з кришкою
Підставка для пляшечки
Соска силіконова
Гарантійний термін зберігання - 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
картонна коробка



Групове:
гофрокороб – 24 шт.



ПОВЕРНУТИСЯ
ДО ЗМІСТУ

МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ



Служить для видалення надлишку молока з грудей годуючої жінки, що сприяє правильній лактації



ПЕРЕВАГИ

Комфортне і швидке зціджування грудного молока
Імітація природного смоктання немовляти
Невеликий молоковідсмоктувач з легкістю поміститься в кожній сумочці, завдяки чому є дуже практичним
Легко збирається і стерилізується

Гарантійний термін зберігання - 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
полімерний пакет, картонна коробка

 **Групове:**
гофрокороб
полімерний пакет – 150 шт.;
картонна коробка – 87шт.

МОЛОКОЗБІРНИК

Для годуючих матерів; для захисту запалених або чутливих сосків жіночих грудей, сосків з тріщинами; для виправлення зміненої форми сосків, зокрема, перед пологами

Являє собою посудину, що складається з двох з'єднаних півсфер з отвором для соска і жолобком для зливу зібраного молока.

Гарантійний термін зберігання - 2 роки з дати виготовлення

ПАКУВАННЯ

 **Індивідуальне:**
картонна коробочка по 2 шт

 **Групове:**
гофрокороб – 54 шт



АСПІРАТОР НОСОВИЙ (спринцівка Б-2) АСП

Для відсмоктування рідини з порожнин організму



ПЕРЕВАГИ

Спеціальна травмобезпечна форма наконечника дозволить зробити процедуру ефективно и безболісно для ніжнього дитячого носика

Балони овальної форми з твердим пластмасовим наконечником, який від'єднується від балона

Гарантійний термін зберігання - 4 роки з дати виготовлення

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Балон 50 мл: 1 шт.

Наконечник: 1 шт.

ПАКУВАННЯ



Індивідуальне:
полімерний пакет



Групове:
гофрокороб - 180 шт.

ГІГІЄНІЧНИЙ НАБІР “КРОХА”

Гігієнічний набір для малюків і їхніх мам



ПЕРЕВАГИ

Компактний набір, який можна використовувати як для малюка, так і для мам

Ідеально підійде для подарунка Вашим близьким і друзям
Вироби, що входять до складу набору виготовляються з високоякісних матеріалів

Термін зберігання молоковідсмоктувача: не більше 2-х років
Термін зберігання спринцівок - 4 роки з дати виготовлення

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Спринцівка з м'яким накінецьником А-1: 1 шт.
Спринцівка з м'яким накінецьником А-3: 1 шт.
Аспіратор носовий Б-2 (АСП): 1 шт.
Молоковідсмоктувач № 3: 1 шт.



Лідер в Україні з виробництва і
продажу виробів з гуми, ПВХ, ТЕР,
силікону та натурального латексу

НАШІ КОНТАКТИ



ТОВ «КИЇВГУМА»
вул. О. Онікієнка (Кутузова), 127
м. Бровари, Київська обл.
07403, Україна



Тел: +38 (044) 364-56-00
Факс: +38 (044) 364-56-28



E-mail: info@kievguma.ua
www.kyivguma.ua

